

Meditalia[®]

Gastroenterology

Improvement Program for  **ELEVEN[®]** Hemoclip

plus
ELEVEN[®]




- 
- Più sicura per l'emostasi
Safer for hemostasis
 - Più forte per la capacità di presa
Stronger for grasping capability
 - Rimovibile dopo il rilascio
Removable after release
 - Più scorrevole nel passaggio attraverso l'endoscopio
Smoother in passing through endoscope

- Programma di miglioramento della Clip
Improvement program on clip




Old

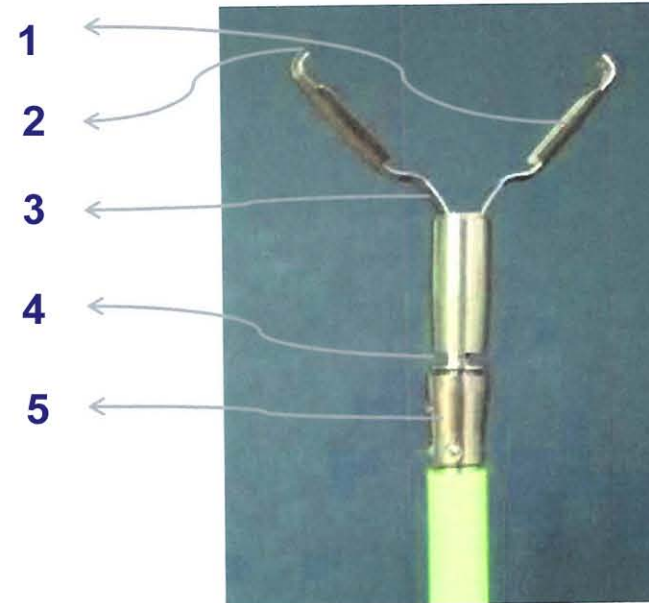


New

- **Miglioramento sicurezza dell'emostasi**
Improvement on hemostasis safety

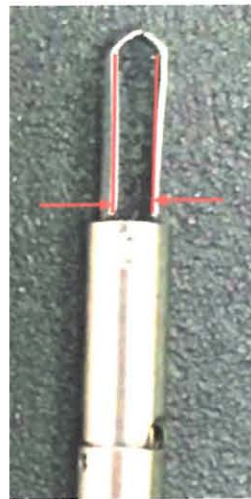

Old

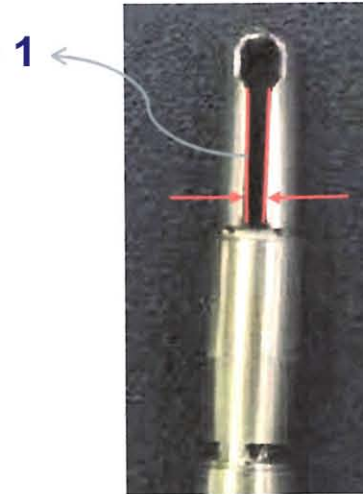



New

Key point:

Conformazione più avvolgente delle barre aumenta in modo efficace il grado di pressione sulla superficie di presa per una migliore chiusura vascolare

*Narrow the gap of middle and rear part of the clip
Effectively increase the pressing degree on grasping tissue
for better vascular closure*

■ Applicazioni Applications

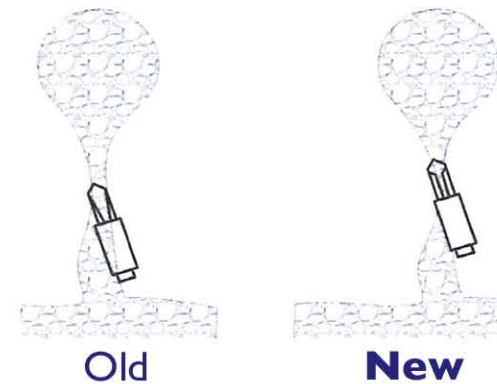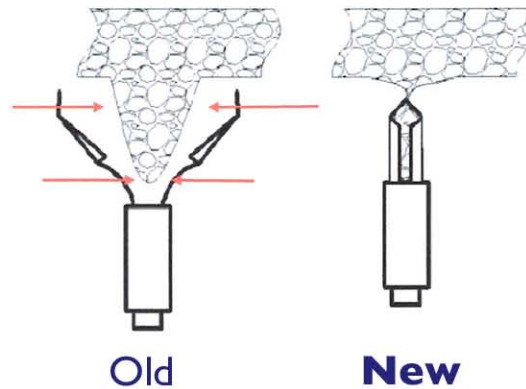

Application 1

Maggiore pressione di serraggio sulla superficie in oggetto assicura la fermezza, mantenendo invariata la quantità di tessuto raccolta



Increasing the clamping pressure on the intersecting surface to assure the firmness, while keep the collected amount of the tissue unchanged

Application 2

La minore distanza assicura una legatura più stretta del peduncolo del polipo, più efficace nel prevenire il sanguinamento o l'errore

The smaller gap assure tighter ligation of polyp pedicle, more effective in preventing bleeding or errhysis

- **Miglioramento della capacità di presa**
Improvements on Grasping capability

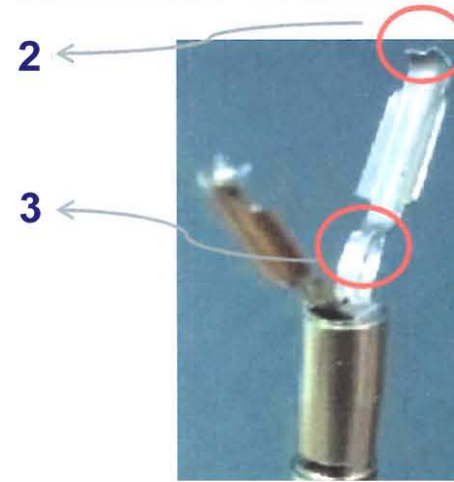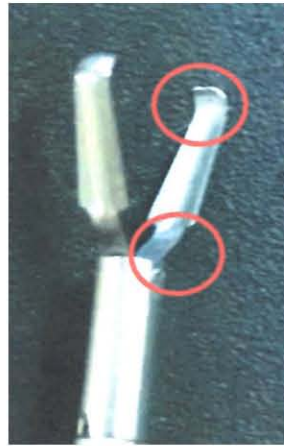

Key point:

Maggiore la rigidità nella sezione di piegatura della clip; tutto ciò permette di aumentare la resistenza alla flessione quando si preme sul tessuto

Increase the height of the prong. Effectively increase the friction force on tissue, preventing tissue from slipping off.

Conformazione più avvolgente delle barre aumenta in modo efficace il grado di pressione sulla superficie di presa per una migliore chiusura vascolare

Increase the rigidity in the bending section of the clip. Increase the bending resistance when pressing the tissue, as well as the pressure and tension on tissue.

- Rimovibile dopo il rilascio
Removable after release

**Key point:**

La progettazione dell'esposizione del punto di blocco meccanico consente all'ansa da polipectomia di sbloccare la clip utilizzando lo stress.
Per le esigenze di rimozione che possono sorgere clinicamente causate dal rilascio insoddisfacente della clip.


*The mechanical locking point exposure design allows the polypectomy snare to unlock the clip by using the stress.
For the removal needs that may arise clinically caused by dissatisfactory release of the clip.*

- Rimovibile dopo il rilascio
Removable after release

Application:


Rimozione mininvasiva della clip con ansa da polipectomia in caso di chiusura non ideale.

Nondesctructive removal by using the snare when the closed position is not ideal.

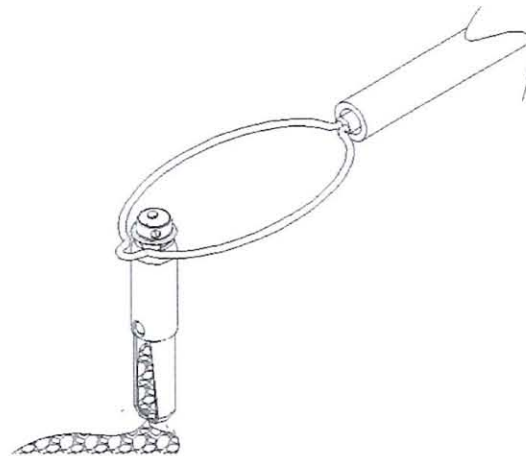

**Stringere la parte
della serratura dopo
il rilascio usando
l'ansa da polipectomia.**

**Tighten the lock part
after release by using
the polypectomy snare**

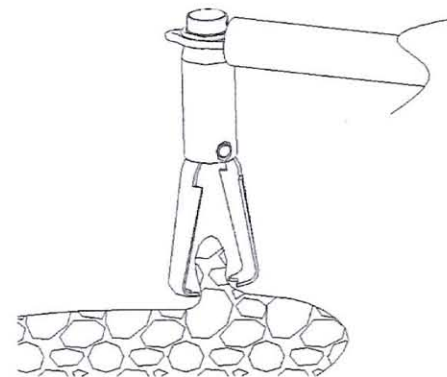

**Riaprire la clip
rilasciata**

**Reopen the
released clip**

- Più scorrevole passaggio attraverso l'endoscopio
Smoother in passing through endoscope

Application:

La punta più corta della clip aiuta l'avanzamento in caso di angoli di piega più elevati, come l'avanzamento del colonscopio.

Shorter tip of the clip helps the forwarding smoother in larger bending angles such as colonoscope forwarding and other sophisticated situations.

